

AllCheck COVID19 Ag

Einstufiger COVID19 Antigen-Test

AllCheck COVID19 Ag ist ein immunchromatografischer Schnelltest zum qualitativen Nachweis spezifischer Antigene zum SARS-CoV-2, die im menschlichen Nasenrachenraum vorkommen.

Der Test ist auch geeignet für öffentliche Gesundheitsstrategien wie z. B. Kontaktverfolgung und groß angelegte Tests von Personen, bei denen eine Infektion vermutet wird.



Merkmale:

- ☒ Einfach zu bedienen und schnelle Prüfung in 10-15 Minuten
- ☒ Alle nötigen Reagenzien integriert
- ☒ Geeignet zum Testen am Pflegeort
- ☒ Keine weiteren Geräte erforderlich

Reagenzien und Materialien

Testgerät, Röhrchen mit Extraktionspuffer, Düsenkappe, steriler Tupfer

Bestellinformationen

Katalog-Nr.	Typ	Packungsgröße	Muster (Specimen)	Probentyp	Haltbarkeit
CHR 11	Testgerät	20 Testkits pro Box	Nasenabstrich	1-30° C	18 Monate

AlI Check COVID19 Ag

Einstufiger COVID19 Antigen-Test




Probenentnahme (Nasopharyngealabstrich)


1. Führen Sie das sterile Wattestäbchen in das Nasenloch des Patienten ein und streichen Sie damit über die Oberfläche des hinteren Nasenrachenraums. Anschließend ziehen Sie das Wattestäbchen aus der Nasenhöhle heraus.




2. Stecken Sie das Wattestäbchen in das Röhrchen mit dem Extraktionspuffer. Halten Sie das Röhrchen gedrückt, während Sie den Wattestab mindestens 5 mal darin auf und ab bewegen.

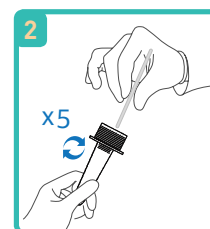

3. Entfernen Sie den Wattestab und halten Sie dabei die Seiten des Röhrchens gedrückt, um die Flüssigkeit vom Stäbchen zu trennen. Halten Sie dabei die Düsenkappe fest ans Röhrchen gedrückt.

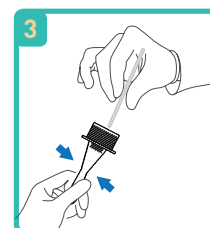


4. Tragen Sie 3-4 Tropfen der entnommenen Probe auf die Probenvertiefung des Testgeräts auf (siehe Testdurchlauf unten).

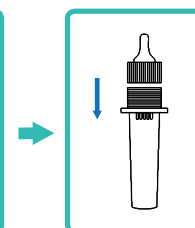

Testdurchlauf

Probenladung und Ablauf

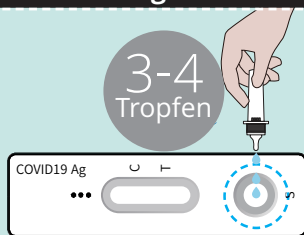


10-15 min

Ergebnisinterpretation


Negativ



Positiv

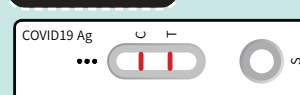

Ungültig

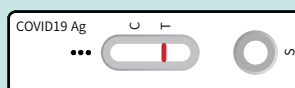

<http://www.thecalth.com / info@thecalth.com>

Hauptquartier : #321, 54, Changeop-ro, Sujeong-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13449, Republic of Korea
Tel : 82-31-754-0320 Fax : 82-31-754-0321

Fertigungsstandort : #7508, 140, Beolmal-ro, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 14057, Republic of Korea
Tel : 82-31-360-0328 Fax : 82-70-8228-0328

AllCheck COVID19 Ag

One step COVID19 Antigen Test

All Check COVID19 Ag is a rapid immunochromatographic test for the qualitative detection of specific antigens to SARS-CoV-2 present in human nasopharynx.

May also be useful for supporting public health strategies, such as contact tracing and largescale testing of people suspected of having an active infection.



Features

- ✓ Easy to use and Fast test time: 10~15minutes
- ✓ All necessary reagents provided
- ✓ Suitable for Point-of-Care testing
- ✓ No need for extra equipment

Reagents and Materials

Test Device, Extraction buffer tube, Nozzle cap, Sterile swab

Ordering Information

Cat.No	Type	Pack Size	Specimen	Sample type	Shelf Life
CHR11	Device	20T/Box	Nasopharyngeal secretion	1~30°C (33.8~86°F)	18months




AllCheck COVID19 Ag

One step COVID19 Antigen Test




Collection of specimen [Nasopharyngeal swab]

1. Insert a sterile swab into the nostril of the patient, swab over the surface of the posterior nasopharynx. Withdraw the sterile swab from the nasal cavity.
2. Insert the swab into an extraction buffer tube. While squeezing the buffer tube, stir the swab more than 5 times.
3. Remove the swab while squeezing the sides of the tube to extract the liquid from the swab. Press the nozzle cap tightly onto the tube.
4. Apply 3~4drops of extracted specimen to the specimen well of the test device.

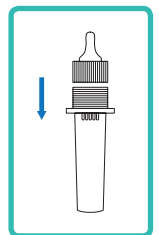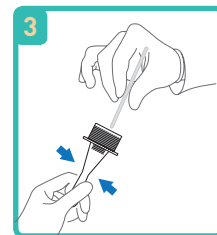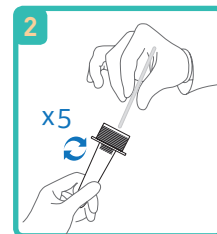

Test Procedure

Sample loading and Run

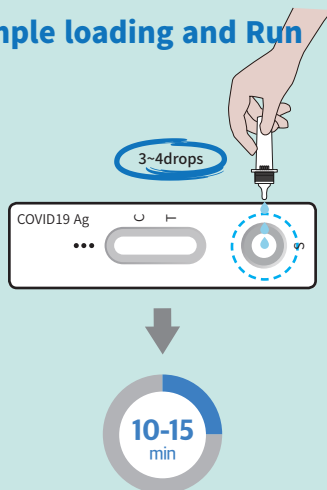


Result Interpretation


Negative



Positive

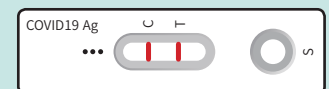

Invalid

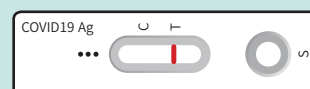

<http://www.thecalth.com> / info@thecalth.com

Headquarters : #321, 54, Changeop-ro, Sujeong-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13449, Republic of Korea
Tel : 82-31-754-0320 Fax : 82-31-754-0321

Manufacturing site : #7508, 140, Beolmal-ro, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 14057, Republic of Korea
Tel : 82-31-360-0328 Fax : 82-70-8228-0328